



Сделано в Японии

Брекеты ортодонтические лигатурные

COBY™

из диоксида циркония, в вариантах исполнения
Регистрационное удостоверение № РЗН 2023/19749 от 09.03.2023.



Каталог продукции
ред. №2 Март 2025г.





Содержание

Описание ----- 2

Особенности ----- 2-4

Описание составных частей ----- 5

Варианты исполнения ----- 6-12

- Брекеты COBY STRAIGHT .018" с прописью ROTH ----- 6-9

- Брекеты COBY STRAIGHT .022" с прописью ROTH ----- 9-12

- Брекеты COBY STANDARD .018" с прописью Edgewise -- 12-13

Материалы для фиксации брекетов ----- 14-15

Инструментарий ортодонтический ----- 16-18

COBY™



БРЕКЕТЫ ИЗ ЦИРКОНОПОЛНЕННОЙ КЕРАМИКИ

ОПИСАНИЕ

Брекеты ортодонтические лигатурные «COBY» из диоксида циркония, в вариантах исполнения (далее – брекет) - сложные ортодонтические несъемные конструкции, применяющиеся для коррекции положения зубов человека при нарушениях прикуса и неровностях зубного ряда, аномалиях роста отдельных зубов, при наличии не прорезавшихся зубов, для улучшения эстетики лица и профиля, а также при подготовке к протезированию и корпусному перемещению зубов.

Представляют собой изделия, которые фиксируются при помощи ортодонтического клея (бондинга) на наружную поверхность зубов. Брекет имеет паз, в котором лежит ортодонтическая дуга, фиксирующаяся при помощи эластичных колечек – лигатур. Сопротивление этой дуги при её фиксации посредством брекетов и лигатур на искривлённых зубах — сила, которая медленно, но неуклонно выравнивает зубы и зубной ряд в полости рта.

ОСОБЕННОСТИ

6 Особенности
COBY™
ZIRCONIA CERAMIC BRACKETS



Прочность
и
гибкость

Низкий
профиль

Система
фиксации
лигатур

Адгезивное
основание




Безопасное
снятие

Эстетика




1 Превосходная прочность и гибкость

Высококачественный материал, позволяющий минимизировать риск возникновения поломок.

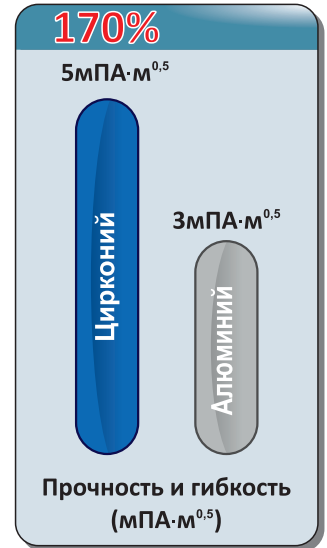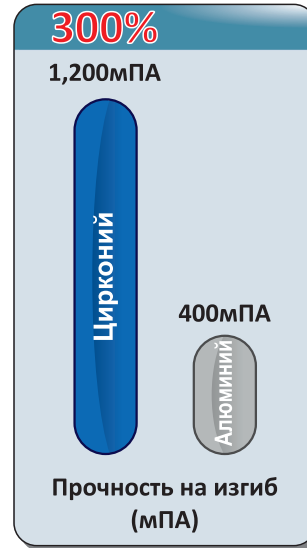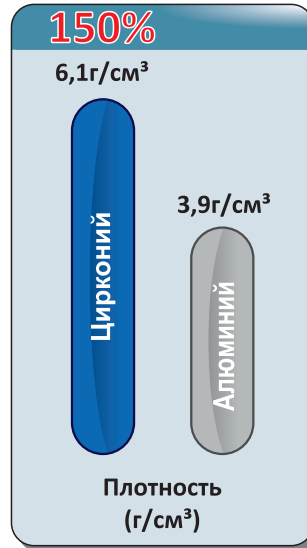


2 Низкий профиль

Циркононаполненная керамика обеспечивает низкий профиль и компактную форму для уменьшения окклюзионных нарушений.

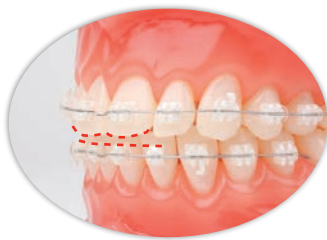

3 Система фиксации лигатур

На начальном этапе обеспечивает быстрый эффект. На промежуточном и завершающем этапах обеспечивает контроль торка.

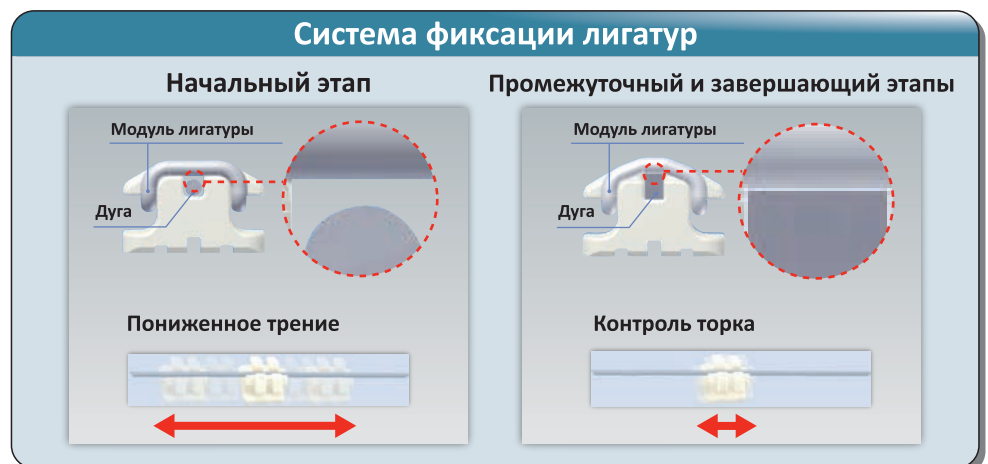

4

Адгезивное основание

Подходит для всех типов адгезивных связей.

Светоотверждение **ОК**

Химическое отверждение **ОК**


Центральная часть



Дизайн поверхности основания брекета обеспечивает условия для оптимального сцепления брекета с поверхностью зуба и комфортного удаления брекета благодаря системе поднутрений/углублений разной глубины.

В центральной части основания созданы условия для максимальной силы сцепления брекета с эмалью зуба.

Внешняя часть

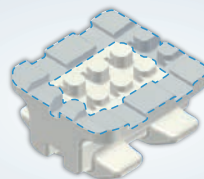


Внешняя часть основания спроектирована в виде системы неглубоких углублений/поднутрений для более легкого снятия брекета.

5


Безопасное снятие

Точки соприкосновения на мезиальных и дистальных углах основания обеспечивают ровное и безопасное снятие брекета без поломки.

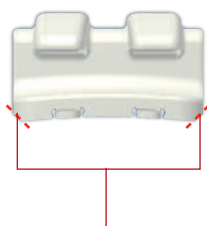

Точка соприкосновения

Ровное снятие

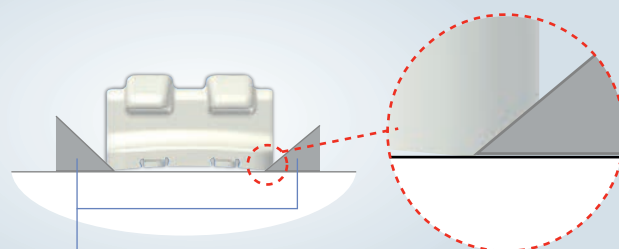

Инструмент для удаления

6

Эстетика

Соответствует естественным зубам.



Оттенок



A1





COBY



A2

Описание основных функциональных элементов (составных частей)

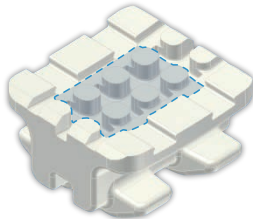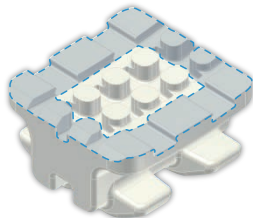№ п/п	Наименование	Фотографическое изображение	Конструкционные особенности
1	Стандартные (Standard)		Брекет имеет паз, в котором лежит ортодонтическая дуга, фиксирующаяся при помощи эластичных колечек – лигатур.
2	Прямые (Straight)		
3	Прямые с крючком (Straight with hook)	 	
4	Основание брекета – Центральная часть		Дизайн поверхности основания брекета обеспечивает условия для оптимального сцепления брекета с поверхностью зуба и комфортного удаления брекета благодаря системе поднутрений / углублений разной высоты. В центральной части основания созданы условия для максимальной силы адгезии брекета с эмалью зуба.
	Основание брекета – Внешняя часть		Внешняя часть основания спроектирована в виде системы невысоких углублений / поднутрений для более легкого удаления брекета.

Варианты исполнения брекетов COBY STRAIGHT .18

Брекеты ортодонтические лигатурные «COBY» из диоксида циркония, в вариантах исполнения STRAIGHT .018:


Паз		Артикул	Вариант исполнения	Зубы	Цвет. метка	Торк	Угол инклинации
STRAIGHT .018" [.018" х .025" Пазы] Для прописи POT (ROTH)	Верхние (10 шт.)	27800	STR-U1R-018	<u>1</u>]		12	5
Характеристика Дуги с пониженным трением: Круглая дуга .012" / .014" / .016" / .018" Прямоугольная дуга .016" х .016" Дуги с контролем торка (ротации): Прямоугольная дуга .016" х .022" 							

Артикул	Вариант исполнения	Фото	Положение		Зуб	Количество в уп., шт.
27800	STR-U1R-018		Верхний	Правый	Центральный резец (1)	10 штук
27801	STR-U1L-018		Верхний	Левый	Центральный резец (1)	10 штук
27802	STR-U2R-018		Верхний	Правый	Латеральный резец (2)	10 штук
27803	STR-U2L-018		Верхний	Левый	Латеральный резец (2)	10 штук
27804	STR-U3R-018		Верхний	Правый	Клык (3)	10 штук
27805	STR-U3L-018		Верхний	Левый	Клык (3)	10 штук
27806	STR-U3R-018H с крючком		Верхний	Правый	Клык (3)	10 штук
27807	STR-U3L-018H с крючком		Верхний	Левый	Клык (3)	10 штук
27808	STR-U45-018		Верхний	Правый / Левый	Первый премоляр (4) / Второй премоляр (5)	10 штук
27811	STR-L12-018		Нижний	Правый / Левый	Универсальный резец (1, 2)	10 штук

Артикул	Вариант исполнения	Фото	Положение		Зуб	Количество в уп., шт.
27813	STR-L3R-018		Нижний	Правый	Клык (3)	10 штук
27814	STR-L3L-018		Нижний	Левый	Клык (3)	10 штук
27815	STR-L3R-018H с крючком		Нижний	Правый	Клык (3)	10 штук
27816	STR-L3L-018H с крючком		Нижний	Левый	Клык (3)	10 штук
27817	STR-L4-018		Нижний	Правый / Левый	Первый премоляр (4)	10 штук
27820	STR-L5-018		Нижний	Правый / Левый	Второй премоляр (5)	10 штук

Варианты исполнения брекетов COBY STRAIGHT .18 - наборы



	Артикул	Вариант исполнения	Зубы
Наборы	27880	STR-018-3-3	$\frac{3+3}{3+3}$
	27881	STR-018-3-3H ✖	
	27884	STR-018-5-5	$\frac{5+5}{5+5}$
	27885	STR-018-5-5H ✖	

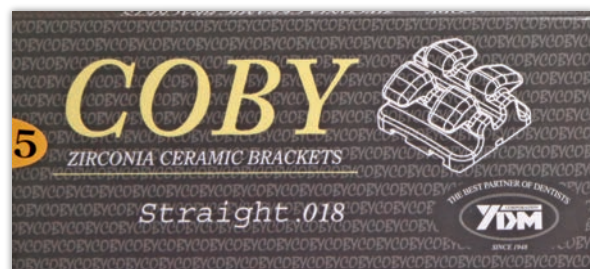

✖ Только UL3 с крючком

Набор COBY
STR-018-3-3

Артикул: 27880

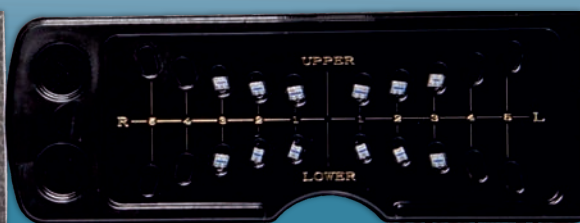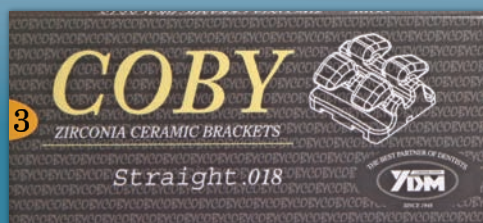



Вариант исполнения	Положение		Зуб	Количество в упаковке, шт.
STR-U1R-018	Верхний	Правый	Центральный резец (1)	1 шт.
STR-U1L-018	Верхний	Левый	Центральный резец (1)	1 шт.
STR-U2R-018	Верхний	Правый	Латеральный резец (2)	1 шт.
STR-U2L-018	Верхний	Левый	Латеральный резец (2)	1 шт.
STR-U3R-018	Верхний	Правый	Клык (3)	1 шт.
STR-U3L-018	Верхний	Левый	Клык (3)	1 шт.
STR-L12-018	Нижний	Правый/Левый	Универсальный резец (1, 2)	4 шт.
STR-L3R-018	Нижний	Правый	Клык (3)	1 шт.
STR-L3L-018	Нижний	Левый	Клык (3)	1 шт.

⚠ При заказе ориентируйтесь по артикулу.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию, дизайн, ценообразование моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных и описанных в этой публикации, в любое время, без каких-либо обязательств и предоставления уведомления о таком изменении. Все технические характеристики, указанные здесь, могут отличаться от фактических характеристик продукта. Все сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия.

Набор COBY STR-018-3-3H


Артикул: 27881

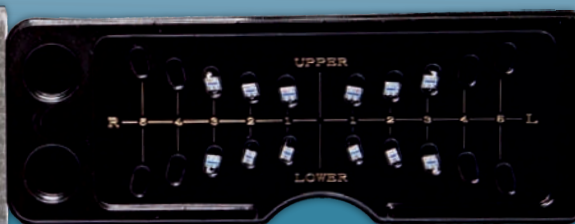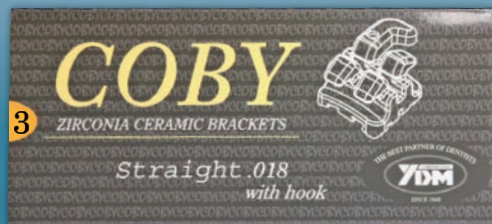

Вариант исполнения	Положение		Зуб	Количество в упаковке, шт.
STR-U1R-018	Верхний	Правый	Центральный резец (1)	1 шт.
STR-U1L-018	Верхний	Левый	Центральный резец (1)	1 шт.
STR-U2R-018	Верхний	Правый	Латеральный резец (2)	1 шт.
STR-U2L-018	Верхний	Левый	Латеральный резец (2)	1 шт.
STR-U3R-018H с крючком	Верхний	Правый	Клык (3)	1 шт.
STR-U3L-018H с крючком	Верхний	Левый	Клык (3)	1 шт.
STR-L12-018	Нижний	Правый/Левый	Универсальный резец (1, 2)	4 шт.
STR-L3R-018H с крючком	Нижний	Правый	Клык (3)	1 шт.
STR-L3L-018H с крючком	Нижний	Левый	Клык (3)	1 шт.

Набор COBY STR-018-5-5


Артикул: 27884

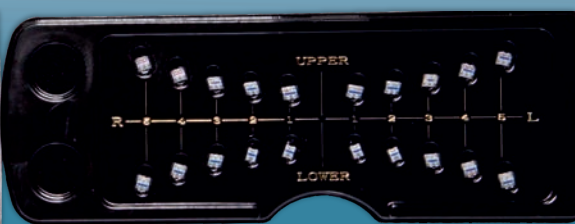

Вариант исполнения	Положение		Зуб	Количество в упаковке, шт.
STR-U1R-018	Верхний	Правый	Центральный резец (1)	1 шт.
STR-U1L-018	Верхний	Левый	Центральный резец (1)	1 шт.
STR-U2R-018	Верхний	Правый	Латеральный резец (2)	1 шт.
STR-U2L-018	Верхний	Левый	Латеральный резец (2)	1 шт.
STR-U3R-018	Верхний	Правый	Клык (3)	1 шт.
STR-U3L-018	Верхний	Левый	Клык (3)	1 шт.
STR-U45-018	Верхний	Правый/Левый	Первый премоляр (4) / Второй премоляр (5)	4 шт.
STR-L12-018	Нижний	Правый/Левый	Универсальный резец (1, 2)	4 шт.
STR-L3R-018	Нижний	Правый	Клык (3)	1 шт.
STR-L3L-018	Нижний	Левый	Клык (3)	1 шт.
STR-L4-018	Нижний	Правый/Левый	Первый премоляр (4)	2 шт.
STR-L5-018	Нижний	Правый/Левый	Второй премоляр (5)	2 шт.

Набор COBY STR-018-5-5H

Артикул: 27885

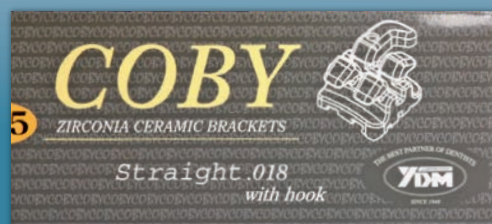

Вариант исполнения	Положение		Зуб	Количество в упаковке, шт.
STR-U1R-018	Верхний	Правый	Центральный резец (1)	1 шт.
STR-U1L-018	Верхний	Левый	Центральный резец (1)	1 шт.
STR-U2R-018	Верхний	Правый	Латеральный резец (2)	1 шт.
STR-U2L-018	Верхний	Левый	Латеральный резец (2)	1 шт.
STR-U3R-018H с крючком	Верхний	Правый	Клык (3)	1 шт.
STR-U3L-018H с крючком	Верхний	Левый	Клык (3)	1 шт.
STR-U45-018	Верхний	Правый/Левый	Первый премоляр (4) / Второй премоляр (5)	4 шт.
STR-L12-018	Нижний	Правый/Левый	Универсальный резец (1, 2)	4 шт.
STR-L3R-018H с крючком	Нижний	Правый	Клык (3)	1 шт.
STR-L3L-018H с крючком	Нижний	Левый	Клык (3)	1 шт.
STR-L4-018	Нижний	Правый/Левый	Первый премоляр (4)	2 шт.
STR-L5-018	Нижний	Правый/Левый	Второй премоляр (5)	2 шт.

Варианты исполнения брекетов COBY STRAIGHT .022


Брекеты ортодонтические лигатурные «COBY» из диоксида циркония, в вариантах исполнения STRAIGHT .022:

Паз		Артикул	Вариант исполнения	Зубы	Цвет. метка	Торк	Угол инклинации	
STRAIGHT .022"[.022" х .028" Пазы] Для прописи POT (ROTH)	Верхние (10 шт.)	27840	STR-U1R-022	<u>1</u>	●	12	5	
		27841	STR-U1L-022	<u>1</u>	●	12	5	
27842		STR-U2R-022	<u>2</u>	●	8	9		
27843		STR-U2L-022	<u>2</u>	●	8	9		
27844		STR-U3R-022	<u>3</u>	●	-2	11		
27845		STR-U3L-022	<u>3</u>	●	-2	11		
27846		STR-U3R-022H	<u>3</u>	●	-2	11		
27847		STR-U3L-022H	<u>3</u>	●	-2	11		
27848		STR-U45-022	<u>54</u> <u>45</u>	●	-7	0		
Характеристика	Нижние (10 шт.)	27851	STR-L12-022	<u>21</u> <u>12</u>	-	0	0	
		27853	STR-L3R-022	<u>3</u>	●	-11	7	
27854		STR-L3L-022	<u>3</u>	●	-11	7		
27855		STR-L3R-022H	<u>3</u>	●	-11	7		
27856		STR-L3L-022H	<u>3</u>	●	-11	7		
27857		STR-L4-022	<u>4</u> <u>4</u>	●	-17	0		
27860		STR-L5-022	<u>5</u> <u>5</u>	●	-22	0		
Изображение								

Артикул	Вариант исполнения	Фото	Положение		Зуб	Количество в уп., шт.
27840	STR-U1R-022		Верхний	Правый	Центральный резец (1)	10 штук
27841	STR-U1L-022		Верхний	Левый	Центральный резец (1)	10 штук
27842	STR-U2R-022		Верхний	Правый	Латеральный резец (2)	10 штук
27843	STR-U2L-022		Верхний	Левый	Латеральный резец (2)	10 штук
27844	STR-U3R-022		Верхний	Правый	Клык (3)	10 штук
27845	STR-U3L-022		Верхний	Левый	Клык (3)	10 штук
27846	STR-U3R-022H с крючком		Верхний	Правый	Клык (3)	10 штук
27847	STR-U3L-022H с крючком		Верхний	Левый	Клык (3)	10 штук
27848	STR-U45-022		Верхний	Правый / Левый	Первый премоляр (4) / Второй премоляр (5)	10 штук
27851	STR-L12-022		Нижний	Правый / Левый	Универсальный резец (1, 2)	10 штук
27853	STR-L3R-022		Нижний	Правый	Клык (3)	10 штук
27854	STR-L3L-022		Нижний	Левый	Клык (3)	10 штук
27855	STR-L3R-022H с крючком		Нижний	Правый	Клык (3)	10 штук
27856	STR-L3L-022H с крючком		Нижний	Левый	Клык (3)	10 штук
27857	STR-L4-022		Нижний	Правый / Левый	Первый премоляр (4)	10 штук
27860	STR-L5-022		Нижний	Правый / Левый	Второй премоляр (5)	10 штук

Варианты исполнения брекетов COBY STRAIGHT .022 - наборы


	Артикул	Вариант исполнения	Зубы
Наборы	27882	STR-022-3-3	$\frac{3+3}{3+3}$
	27883	STR-022-3-3H ✖	
	27886	STR-022-5-5	$\frac{5+5}{5+5}$
	27887	STR-022-5-5H ✖	

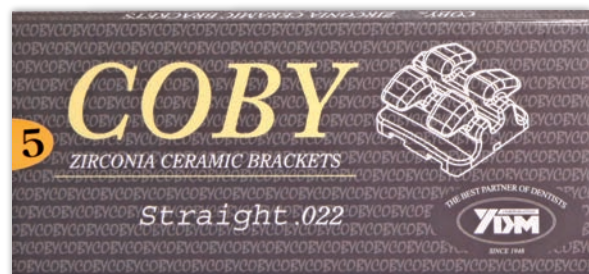

✖ Только UL3 с крючком

Набор COBY STR-022-3-3


Артикул: 27882

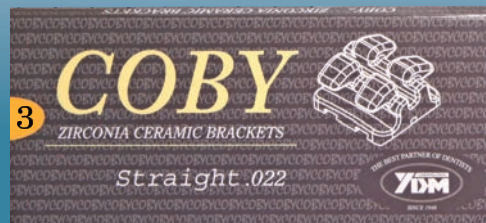

Вариант исполнения	Положение		Зуб	Количество в упаковке, шт.
STR-U1R-022	Верхний	Правый	Центральный резец (1)	1 шт.
STR-U1L-022	Верхний	Левый	Центральный резец (1)	1 шт.
STR-U2R-022	Верхний	Правый	Латеральный резец (2)	1 шт.
STR-U2L-022	Верхний	Левый	Латеральный резец (2)	1 шт.
STR-U3R-022	Верхний	Правый	Клык (3)	1 шт.
STR-U3L-022	Верхний	Левый	Клык (3)	1 шт.
STR-L12-022	Нижний	Правый/Левый	Универсальный резец (1, 2)	4 шт.
STR-L3R-022	Нижний	Правый	Клык (3)	1 шт.
STR-L3L-022	Нижний	Левый	Клык (3)	1 шт.

Набор COBY STR-022-3-3H


Артикул: 27883

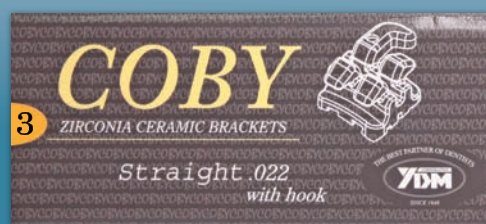

Вариант исполнения	Положение		Зуб	Количество в упаковке, шт.
STR-U1R-022	Верхний	Правый	Центральный резец (1)	1 шт.
STR-U1L-022	Верхний	Левый	Центральный резец (1)	1 шт.
STR-U2R-022	Верхний	Правый	Латеральный резец (2)	1 шт.
STR-U2L-022	Верхний	Левый	Латеральный резец (2)	1 шт.
STR-U3R-022H с крючком	Верхний	Правый	Клык (3)	1 шт.
STR-U3L-022H с крючком	Верхний	Левый	Клык (3)	1 шт.
STR-L12-022	Нижний	Правый/Левый	Универсальный резец (1, 2)	4 шт.
STR-L3R-022H с крючком	Нижний	Правый	Клык (3)	1 шт.
STR-L3L-022H с крючком	Нижний	Левый	Клык (3)	1 шт.

Набор COBY STR-022-5-5

Артикул: 27886

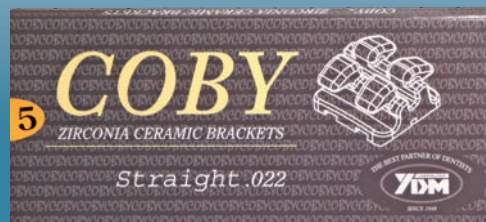

Вариант исполнения	Положение		Зуб	Количество в упаковке, шт.
STR-U1R-022	Верхний	Правый	Центральный резец (1)	1 шт.
STR-U1L-022	Верхний	Левый	Центральный резец (1)	1 шт.

Продолжение состава набора на следующей странице.


⚠ При заказе ориентируйтесь по артикулу.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию, дизайн, ценообразование моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных и описанных в этой публикации, в любое время, без каких-либо обязательств и предоставления уведомления о таком изменении. Все технические характеристики, указанные здесь, могут отличаться от фактических характеристик продукта. Все сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия.

STR-U2R-022	Верхний	Правый	Латеральный резец (2)	1 шт.
STR-U2L-022	Верхний	Левый	Латеральный резец (2)	1 шт.
STR-U3R-022	Верхний	Правый	Клык (3)	1 шт.
STR-U3L-022	Верхний	Левый	Клык (3)	1 шт.
STR-U45-022	Верхний	Правый/Левый	Первый премоляр (4) / Второй премоляр (5)	4 шт.
STR-L12-022	Нижний	Правый/Левый	Универсальный резец (1, 2)	4 шт.
STR-L3R-022	Нижний	Правый	Клык (3)	1 шт.
STR-L3L-022	Нижний	Левый	Клык (3)	1 шт.
STR-L4-022	Нижний	Правый/Левый	Первый премоляр (4)	2 шт.
STR-L5-022	Нижний	Правый/Левый	Второй премоляр (5)	2 шт.

Набор COBY STR-022-5-5H

Артикул: 27887

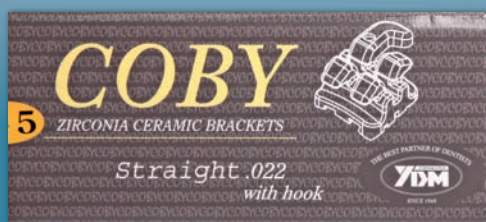

Вариант исполнения	Положение		Зуб	Количество в упаковке, шт.
STR-U1R-022	Верхний	Правый	Центральный резец (1)	1 шт.
STR-U1L-022	Верхний	Левый	Центральный резец (1)	1 шт.
STR-U2R-022	Верхний	Правый	Латеральный резец (2)	1 шт.
STR-U2L-022	Верхний	Левый	Латеральный резец (2)	1 шт.
STR-U3R-022H с крючком	Верхний	Правый	Клык (3)	1 шт.
STR-U3L-022H с крючком	Верхний	Левый	Клык (3)	1 шт.
STR-U45-022	Верхний	Правый/Левый	Первый премоляр (4) / Второй премоляр (5)	4 шт.
STR-L12-022	Нижний	Правый/Левый	Универсальный резец (1, 2)	4 шт.
STR-L3R-022H с крючком	Нижний	Правый	Клык (3)	1 шт.
STR-L3L-022H с крючком	Нижний	Левый	Клык (3)	1 шт.
STR-L4-022	Нижний	Правый/Левый	Первый премоляр (4)	2 шт.
STR-L5-022	Нижний	Правый/Левый	Второй премоляр (5)	2 шт.

Варианты исполнения брекетов COBY STANDARD .018

Брекеты ортодонтические лигатурные «COBY» из диоксида циркония, в вариантах исполнения STANDARD .018:

Паз		Артикул	Вариант исполнения	Зубы	Цвет. метка	Торк	Угол инклинации	
STANDARD .018" [.018" x .025" Пазы] Для прописи ЭДЖУАЙС (EDGEWISE)	Верхние и Нижние (10 шт.)	27870	STD-U1-018	<u>1 1</u>	-	0	0	
		27871	STD-U2-018	<u>2 2</u>	-	0	0	
Изображение		27872	STD-345-018	<u>543 345</u> <u>543 345</u>	-	0	0	
		27873	STD-L12-018	<u>21 12</u>	-	0	0	
 .020"	Набор	27890	STD-018-3-3	<u>3+3</u> <u>3+3</u>	-	-	-	
		27892	STD-018-5-5	<u>5+5</u> <u>5+5</u>	-	-	-	
Характеристика								
Дуги с пониженным трением: Круглая дуга .012" / .014" / .016" / .018" Прямоугольная дуга .016" x .016" Дуги с контролем торка (ротации): Прямоугольная дуга .016" x .022" / .017" x .025" / .018" x .025"								

Артикул	Вариант исполнения	Фото	Положение		Зуб	Количество в уп., шт.
27870	STD-U1-018		Верхний	Правый/Левый	Центральный резец (1)	10 штук
27871	STD-U2-018		Верхний	Правый/Левый	Латеральный резец (2)	10 штук
27872	STD-345-018		Верхний/Нижний	Правый/Левый	Клык (3)	10 штук
27873	STD-L12-018		Нижний	Правый/Левый	Универсальный резец (1, 2)	10 штук

Набор COBY STD-018-3-3

Артикул: 27890



Вариант исполнения	Положение		Зуб	Количество в упаковке, шт.
STD-U1-018	Верхний	Правый/Левый	Центральный резец (1)	2 шт.
STD-U2-018	Верхний	Правый/Левый	Латеральный резец (2)	2 шт.
STD-345-018	Верхний /	Правый/Левый	Клык (3)	4 шт.
(только клыки (3))	Нижний			
STD-L12-018	Нижний	Правый/Левый	Универсальный резец (1, 2)	4 шт.

Набор COBY STD-018-5-5

Артикул: 27892



Вариант исполнения	Положение		Зуб	Количество в упаковке, шт.
STD-U1-018	Верхний	Правый/Левый	Центральный резец (1)	2 шт.
STD-U2-018	Верхний	Правый/Левый	Латеральный резец (2)	2 шт.
STD-345-018	Верхний /	Правый/Левый	Клык (3), Первый премоляр (4), Второй премоляр (5)	12 шт.
STD-L12-018	Нижний	Правый/Левый	Универсальный резец (1, 2)	4 шт.

Материалы для фиксации брекетов, представление компании YAMAKIN Япония



Компания **YAMAKIN CO., LTD.**, Япония, с 2006 г. является производителем технических и врачебных композитных материалов для прямых и непрямых реставраций, адгезивов, керамических масс. Мы представляем Вам современные пломбировочные композитные материалы **iGOS** и **Z Fill 10**. - для высокоэстетичной фиксации брекетов **YDM COBY**, адгезивы **iGOS-BOND** и **Aqua Bond 0** с высокой адгезией во влажной среде - для надежного сцепления эмали зуба с композитным материалом, гель для травления и очищения **Multi Etchant** - для подготовки поверхности зуба к нанесению адгезива.

Краткое описание материалов для фиксации брекетов (YAMAKIN Япония)

Multi-Etchant (гель для травления и очищения): Универсальный протравливающий агент для циркония, керамики, стеклокерамики, композитов, сплавов драгоценных и недрагоценных металлов, эмали и дентина.

iGOS-BOND / AQUA BOND 0: Жидкие бондинги с высокой степенью адгезии во влажной среде. Для прямых реставраций фронтальных и жевательных зубов, пломбировки полостей всех типов, ремонта сколов, керамических коронок и мостов, надежного сцепления эмали зуба с композитным материалом.

iGOS / Z Fill 10: Материалы стоматологические пломбировочные, цирконосодержащие, светоотверждаемые, композитные на основе субмикронного керамического кластерного наполнителя, для высокоэстетичной фиксации брекетов **YDM COBY**

СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ



Описание материалов для фиксации брекетов (YAMAKIN Япония)

Multi Etchant



Фасовка: шприц в индивидуальной упаковке 2мл - 1 шт. в составе Одноразовая канюля Needle Tip 5шт. **Вес:** 2мл. **Артикул:** 00092801

Универсальный протравливающий агент для циркония, керамики, стеклокерамики, композитов, сплавов драгоценных и недрагоценных металлов, эмали и дентина.

Гель для травления и очищения Multi Etchant не содержит фосфорной кислоты. В нем содержится адгезивный фосфатный мономер (11 - Метакрилоилокси тетраэтиленгликоль дигидрофосфат, M-TEG-P), разработанный компанией YAMAKIN, благодаря чему Multi Etchant может использоваться для очистки различных типов материалов, таких как керамика, металлы и композиты. Multi Etchant - это мягкий травильный материал, который можно использовать как с эмалью, так и с дентином. Кроме того, он также обладает свойством сильного связующего агента для циркония, создавая эффект праймера.



iGOS-BOND

Фасовка: флакон в индивидуальной упаковке 5мл - 1 шт. **Вес:** 5мл. **Артикул:** 40300101

Бондинг жидкий iGOS-Bond с высокой степенью адгезии во влажной среде

Для прямых реставраций фронтальных и жевательных зубов, пломбировки полостей всех типов, ремонта сколов, керамических коронок и мостов.

Зубной адгезив для эмали или дентина, достигающий высокой адгезии в ротовой полости при влажных условиях. При использовании iGOS-BOND совместно со связывающим материалом Multi Primer Liquid (ПУ № РЗН 2016/3740) можно добиться адгезии с широким диапазоном материалов таких, как цирконий, титан, сплавы драгоценных и недрагоценных металлов, стоматологическая керамика и композитные материалы.



TMR-AQUA BOND 0

Фасовка: флакон в индивидуальной упаковке 5мл - 1 шт. **Вес:** 5мл. **Артикул:** 40700001

Бондинг жидкий TMR-AQUA BOND 0 с высокой степенью адгезии во влажной среде. Для прямых реставраций фронтальных и жевательных зубов, пломбировки полостей всех типов, ремонта сколов, керамических коронок и мостов.

Зубной адгезив для эмали или дентина, достигающий высокой адгезии в ротовой полости при влажных условиях. При использовании TMR-AQUA BOND 0 совместно со связывающим материалом Multi Primer Liquid (ПУ № РЗН 2016/3740) можно добиться адгезии с широким диапазоном материалов таких, как цирконий, титан, сплавы драгоценных и недрагоценных металлов, стоматологическая керамика и композитные материалы.

TMR Z-Fill 10.



Фасовка: шприц в индивидуальной упаковке 2,6 г (1,5 мл) - 1 шт. в составе Одноразовая канюля Needle Tip 10шт. **Вес:** 2,6 г (1,5 мл).

TMR Z-Fill 10. Low Flow - текучий

Материал стоматологический пломбировочный «TMR Z-Fill 10. Low Flow», цирконосодержащий, светоотверждаемый, композитный на основе субмикронного керамического кластерного наполнителя, текучий

Базовые оттенки



Опакровые оттенки



Отбеливание



Эмаль



LOWFLOW

- На расцветке представлены фотографии слоев композитов толщиной в 1 мм.
- Оттенок зависит от толщины слоя композита и цвета фона

iGOS



Фасовка: шприц в индивидуальной упаковке 2,6 г (1,5 мл) - 1 шт. в составе Одноразовая канюля Needle Tip 10шт. **Вес:** 2,6 г (1,5 мл).

iGOS Low Flow - текучий

Материал стоматологический пломбировочный «iGOS Low Flow», цирконосодержащий, светоотверждаемый, композитный на основе субмикронного керамического кластерного наполнителя, текучий

Базовые оттенки



Опакровые оттенки



Отбеливание



Эмаль



LOWFLOW

- На расцветке представлены фотографии слоев композитов толщиной в 1 мм.
- Оттенок зависит от толщины слоя композита и цвета фона

Инструментарий ортодонтический (YDM Япония)


ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБРЕЗКИ И УДЕРЖАНИЯ ПРОВОЛОКИ



Артикул: 27606

Описание: Отрезает и удерживает дистальный конец дугообразной проволоки. Вставки из цементированного карбида обеспечивают высокую производительность и длительный срок службы наконечников инструмента.

РЕЗАК ДЛЯ ШТИФТОВ И ЛИГАТУР

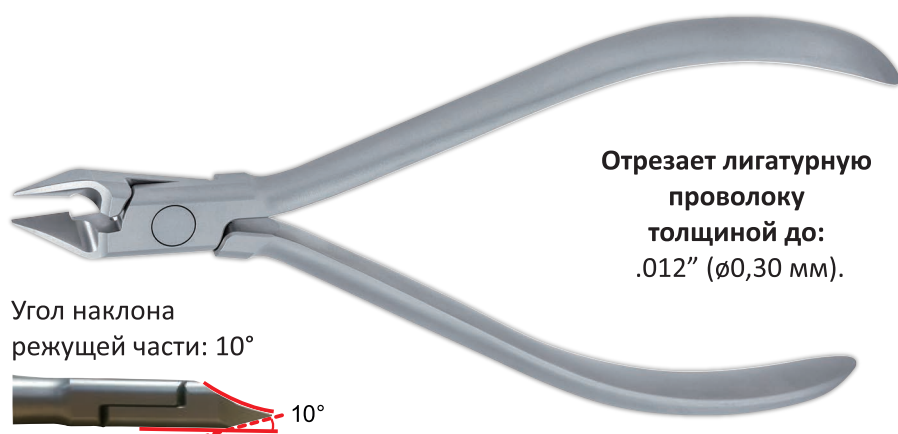

Артикул: 27605

Описание: Отрезает лишнюю лигатурную проволоку. Вставки из твердого материала обеспечивают перерезание лигатурной проволоки и эластика избегая поломки. Угол наклона 10 ° и тонкий изгиб обеспечивают легкий доступ как к передним, так и к коренным зубам.

ГИБОЧНЫЕ ПЛОСКОГУБЦЫ



Артикул: 27418

Описание: Наконечник формы "птичий клюв". Согните фиксирующую проволоку, защелкните.

Инструментарий ортодонтический (YDM Япония)

ГИБОЧНЫЕ ПЛОСКОГУБЦЫ



Размер
133 мм

Максимальная
пропускная способность
для проволоки:
.022"x.028"



Формирование
твидовой петли

Артикул: 27416

Описание: Круглый клюв имеет форму 3 слоев цилиндров для формирования твидовой петли (диаметром 1,25 мм, 1,85 мм, 2,26 мм), которые можно использовать для замыкания винтовой петли, спиральной петли, омега-петли.

ПЛОСКОГУБЦЫ ДЛЯ ОКАНТОВКИ




Снятие ленты

Артикул: 27443

Описание: Используются для снятия ленты. Матовая поверхность позволяет избежать отражения от плоскогубцев при ярком освещении.

КУСАЧКИ ДЛЯ ПРОВОЛОКИ

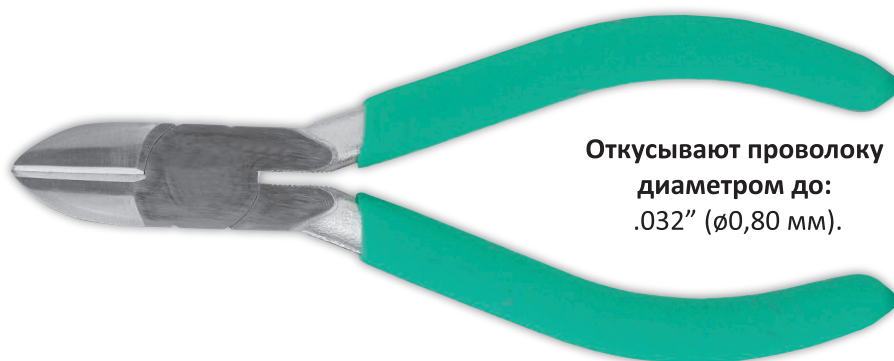

Откусывают проволоку
диаметром до:
.032" (ø0,80 мм).

Артикул: 22601

Описание: Кусачки для фиксирующей проволоки, проволоки для застёжек.

Инструментарий ортодонтический (YDM Япония)

ПЛОСКОГУБЦЫ ДЛЯ ЗАВЯЗЫВАНИЯ



Форма края
плоскогубцев



Артикул: 22506

Описание: Плоскогубцы для привязывания лигатурной проволоки к кронштейну.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ УСТАНОВКИ И СНЯТИЯ ЛИГАТУР



Артикул: 22754

Описание: Используются для установки и снятия лигатур. Привяжите лигатурную проволоку к кронштейну в форме крыла. С помощью одного инструмента выполняются две функции - заправка и завязывание.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК



COBY™



Dental-East

**Стоматологические
оборудование и материалы**

ООО «Дентал-Ист» 125195, г.Москва, Ленинградское шоссе, д. 96А.

Тел./Факс: 8 (800) 222-77-05 (многоканальный), (499) 458-67-37,
(499) 458-73-27, (499) 745-63-16, (499) 745-63-20.

E-mail: sales@dental-east.ru, Сайт: www.dental-east.ru

Наш партнёр
интернет-магазин
a3-dent.ru

оборудование и материалы
для стоматологии
A3·DENT.RU



Ред. №2 Март 2025г.

